

Mikroskoopide käivitusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud väikeste, paljale silmale tavaliselt nähtamatute, objektide vaatlemiseks.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

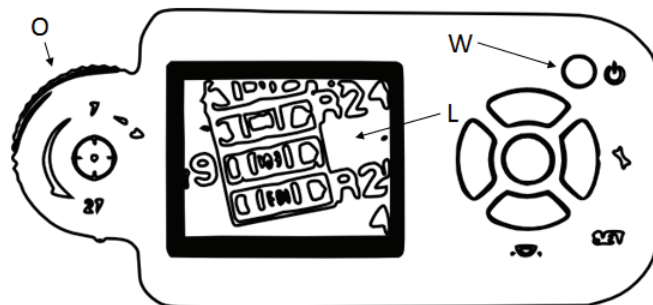


Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

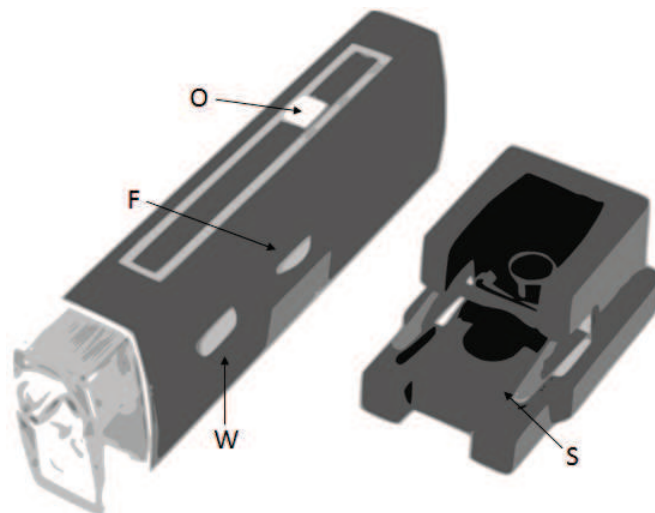

F - teravus L - LCD kuvar O - optiline suum S - alus uuritavate objektide kinnitusklambriga W - toitelüliti

- Asetada lauamikroskoop tasapinnalisele aluspinnale.
- Ühendada toitejuhe asjakohase pesaga, kui selline seadmes esineb.
- Asetada mikroskoobi valmistis kinnitusklambrisse, kui selline esineb.
- Lülitada seade nupu abil sisse.
- Seadistada suurendus ja teravus ning vaadelda objekti läbi lauamikroskoobi okulaari või käsimikroskoobi kuvaril.

4. Kaitsevahendid

- Peale töö lõpetamist tuleb vaadeldav objekt alati välja võtta.
- Elektriliste mikroskoopide korral tuleb toitejuhe alati lahti ühendada.
- Kasutada mikroskoopi ainult kuivas kohas.
- Mikroskoobi kasutamisel päikesepaistelises kohtades, tuleb olla eriti ettevaatlik, et mikroskoobi optilised elemendid või nägemine ei saaks kahjustusi.
- Mikroskoobi metallist pindu võib puhastada kergelt niisutatud lapiga.
- Optilisi elemente puhastada ainult kuiva ja väga pehme lapiga (mikrokiust).
- Tolmu eemaldada pehme pintslikesse abil.
- Mikroskoobi korpust mitte lahti võtta.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOOD: 473171710

Łódźi - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN